

SootheNeb

NBL100 Mesh Nebulizer Cleaning Guide



This nebulizer offers a unique and advanced mesh technology that delivers your medication without the need of heating, and efficiently provides an exceptional treatment delivery system.

By following these simple seven steps, you will improve the longevity and functionality of your new SootheNeb Mesh Nebulizer. Prior to cleaning, make sure you have some **distilled water** on hand, which can be purchased at your local grocery store, and ensure that the device has completed the last medicine delivery cycle and is completely turned off.


Distributed by ForCare, Inc.
893 Patriot Dr., Suite D
Moorpark, CA 93021 USA
Products made in Taiwan
Toll Free: 1-888-307-8188 (8:30am-5:00pm PST, Monday-Friday)
For assistance outside of these hours, please contact your healthcare professional.



1 Remove the accessories and the mesh cap from the main unit but keep the medication cup attached.



2 Pour out any remaining medication.

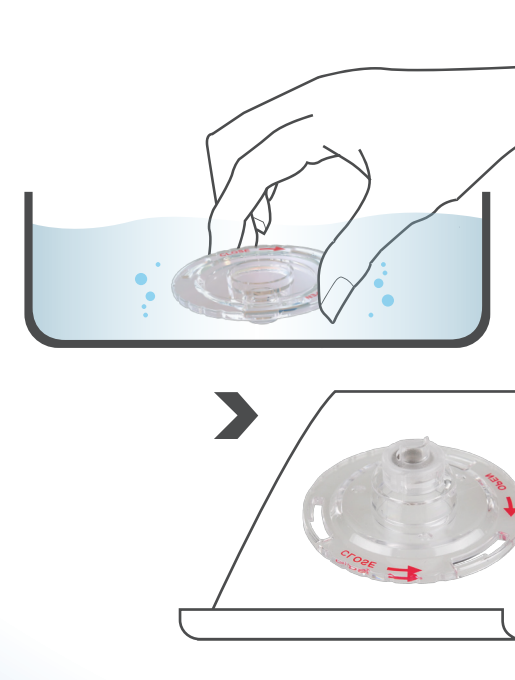


3 **Submerge Only** the **MESH CAP (not the medication cup)** in distilled water for about 30 seconds. Then, carefully **DRY** with a clean paper towel.



4 Add a small amount (approximately 1 ml) of distilled water into the medication cup.



5 Twist the mesh cap back on to the medication cup then press the on button to nebulize the distilled water for 1 to 2 minutes to remove residual medication.

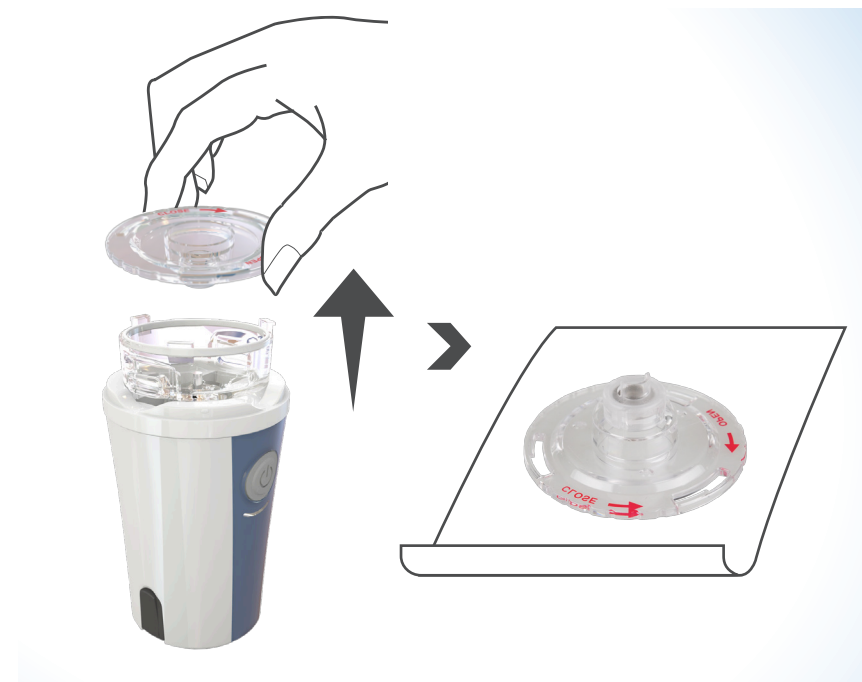

6 Turn off the device after it's done then remove the medication cup to air **DRY** on a clean paper towel.



7 Once **all components** are **DRY**, assemble device and store in a clean environment.

SootheNeb

Guía de limpieza para el Nebulizador NBL100 Mesh




Este nebulizador ofrece una tecnología de malla única y avanzada que libera su medicamento sin la necesidad de calentamiento, y provee un sistema de tratamiento excepcional e eficaz.

Al seguir estos siete pasos, aumentará la longevidad y el funcionamiento de su nuevo nebulizador SootheNeb Mesh. Antes de limpiar, asegure que tenga una botella de **agua destilada** a la mano. El agua destilada se puede comprar en cualquier supermercado y no es lo mismo que agua embotellada. También asegure que su nebulizador allá completado el último ciclo de medicina y esté completamente apagado.

Distribuido por ForaCare, Inc.
893 Patriot Dr., Suite D
Moorpark, CA 93021 USA
Productos fabricados en Taiwán


Nº gratuito: 1-888-307-8188 (8:30am~5:00pm PST, Lunes a Viernes)
Para obtener asistencia fuera de estos horarios, póngase en contacto con el profesional de la salud.

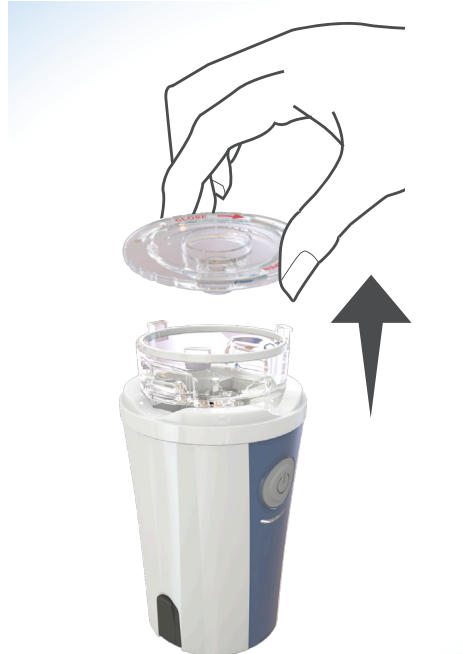

- 1** Remueva solamente los accesorios y la tapa de malla de la unidad, **NO** la taza de medicamento.



- 2** Tire cualquier medicamento que sobre dentro de la unidad.

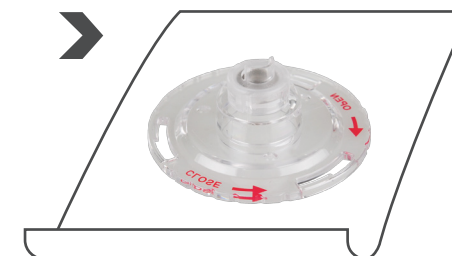

- 3** **Sumerja solo la tapa de malla (no la taza de medicamento)** en agua destilada por 30 segundos. Luego, **seque** la tapa cuidadosamente con una toalla de papel limpia.



AVISO
No moje el conector en la parte baja de la taza de medicamento, o el enchufe para el conector.




- 4** Añade aproximadamente 1ml de agua destilada a la taza de medicamento.



- 5** Vuelva a poner la tapa de malla sobre la unidad y prenda el nebulizador de 1 a 2 minutos para que se limpie y remueva cualquier residuo de medicamento.

NOTA:
Si el vapor es lento, remueva la tapa de malla y sacuda el agua sobrante.

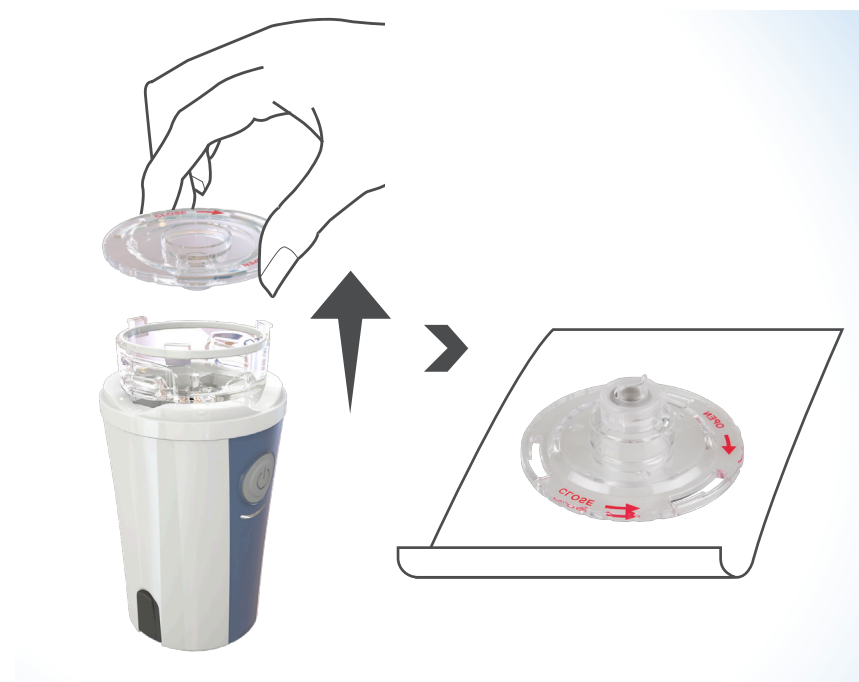

- 6** Ya que termine, apague el nebulizador y remueva la tapa de malla para que se seque al aire libre sobre una toalla limpia.



- 7** Ya que **todos los componentes** estén **secos**, arme la unidad y guárdelo en un área limpia y seca.